


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE




Demineralizați suprafața cu ETCHGEL, clătiți și uscați ușor.

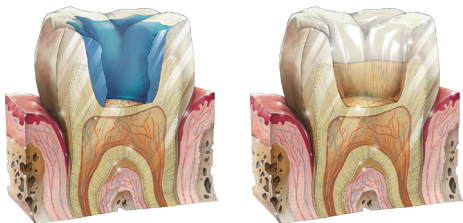

Acoperiți bine cavitatea cu un strat subțire al unui sistem adeziv. SILKFLOW poate fi utilizat cu orice sistem adeziv standard, pe bază de rășină dimetacrilat, fotopolimerizabil. Un sistem adeziv trebuie aplicat în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

În cazul cavităților foarte adânci, acoperiți fundul unei astfel de cavități cu un strat subțire de liner și apoi aplicați straturi (nu mai groase de 2 mm) de compozit SILKFLOW (a). Fotopolimerizați fiecare strat în conformitate cu tabelul de polimerizare furnizat. Suprafața de mestecat poate fi modelată și cu materiale condensabile solide (b). Cavități mici și medii și dinți cu cavități de suprafață deja pregătite (după demineralizare și aplicarea unui sistem adeziv) pot fi acoperite complet cu SILKFLOW, respectând regulile de polimerizare (c).

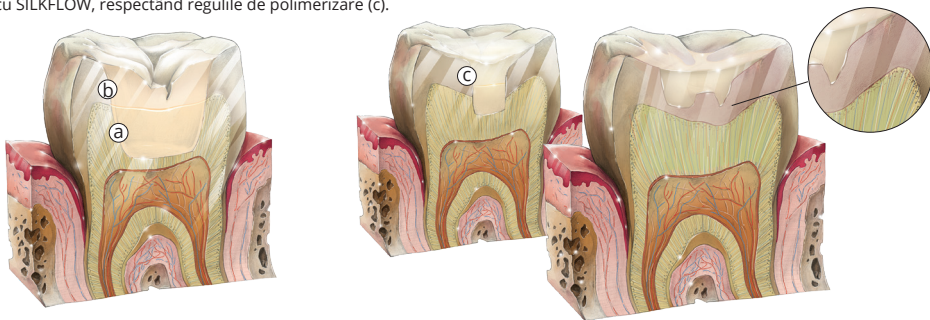

INDICAȚII DE UTILIZARE

- Cavitățile claselor I, II, III, IV și V conform Black
- obturarea rapidă a cavităților înainte de modelarea finală a suprafeței de mestecat cu compozite condensabile
- cavități mici și superficiale
- primul strat în locuri cu acces dificil, cum ar fi cavități foarte adânci de clasa II cu matrice în benzi, restaurări în tunel etc.
- repararea unor mici cavități în punți și coroane composite
- conținția permanentă a dinților
- alternativ, în proceduri de inlay/onlay direct în gură

COMPOZIȚIE

Amestec de rășini dimetacrilat: BisGMA, TEGDMA, UDMA, BisEMA; umpluturi minerale (aproximativ 62% în greutate): sticlă Al-Ba-B-Si, sticlă Ba-Al-B-F-Si, silice fumată, pigmenti; fotoinițiator (CQ : DMAEMA). Dimensiunea particulelor de umplere anorganice este cuprinsă între 20 nm și 2,0 μm.

MD Dispozitiv medical clasa IIa

SILKFLOW este un material dentar polimer fluid de tip 1 (clasa 2, grupa 1), care îndeplinește cerințele standardului ISO 4049. Compozitul SILKFLOW este supus polimerizării cu radicali liberi activat de lumina vizibilă din regiunea albastră (400-500 nm). SILKFLOW are o radio-opacitate echivalentă cu 4 mm de aluminiu (aluminiu are o radio-opacitate echivalentă cu cea a dentinei; astfel, 1 mm de material care are o radio-opacitate echivalentă cu 1 mm de aluminiu are o radio-opacitate echivalentă cu cea a dentină și 2 mm de aluminiu este echivalent cu smalțul).

TABEL DE POLIMERIZARE

Lampă	SILKFLOW	20 s	30 s
Halogen/LED (500-800 mW/cm ²)	A1, A2, A3	2,0 mm	3,0 mm
	A3.5, OA2	2,0 mm	2,5 mm
LED (> 800mW/cm ²)	A1, A2, A3	2,0 mm	3,5 mm
	A3.5, OA2	2,0 mm	3,0 mm

Dacă este nevoie, alegeți nuanța potrivită din ghidul de nuanțe al compozitului SILKFLOW înalte de a începe tratamentul atunci când dintele este hidratat în mod natural.

CONTRAINDICAȚII

Nu utilizați compozitul SILKFLOW la pacienții cu alergii cunoscute la compuşii din produs.

REACTII ADVERSE

Nu se cunosc reacții adverse. Cu toate acestea, o reacție alergică nu poate fi exclusă la persoanele deosebit de sensibile. În cazul unei reacții alergice imediate, opriți utilizarea produsului. În cazul unei reacții alergice întârziate, îndepărtați restaurarea.

LIMITĂRI DE UTILIZARE, INTERACȚIUNI

Nu folosiți dacă este imposibil să izolați complet zona de salivă, sânge sau umiditate. Contaminarea poate perturba procesul de polimerizare, afectând proprietățile mecanice ale compozitului și scade durabilitatea restaurării, ceea ce la rândul său poate duce la formarea cariilor secundare. Nu folosiți cu materiale care conțin compuşii fenolici, în special eugenol și timol. Astfel de materiale pot perturba polimerizarea compozitului.

PRECAUȚII

Evitați contactul produsului nepolimerizat cu pielea, ochii și țesuturile moi ale gurii. În cazul unui astfel de contact, clătiți cu multă apă.

În caz de simptome, consultați un medic oferindu-i informații despre produs. Pentru a reduce riscul de contact, purtați întotdeauna echipament de protecție personală, cum ar fi mănuși, măști pentru față și ochelari de siguranță.

În caz de înghițire sau aspirație în tractul respirator, solicitați asistență medicală imediată

Pentru izolarea câmpului operator și protejarea pacientului, se recomandă utilizarea unui baraj de cauciuc.

Asigurați o polimerizare suficientă a întregului strat compozit, în special în locuri dificil de accesat. Produsul insuficient polimerizat poate fi alergen.

În cazul contaminării unui compozit nepolimerizat, stratul de material contaminat trebuie îndepărtat. În caz de contaminare sau deteriorare mecanică a unui strat deja polimerizat, etansați ușor suprafața acestuia și acoperiți-l cu un sistem de lipire. Fotopolimerizați în conformitate cu tabelul de polimerizare furnizat.

În cazul unei polimerizări insuficiente, îndepărtați stratul polimerizat încorect și aplicați altul, fotopolimerizându-l corect.

Evitați contaminarea suprafeței seringii (riscul de infecție încrucișată).

Atunci când aplicați SILKFLOW direct de la seringă, din motive igienice, aplicatorul trebuie utilizat doar la un pacient.

Pentru a evita polimerizarea accidentală a compozitului în aplicator, trageți întotdeauna înapoi pistonul seringii.

AVERTIZĂRI



A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a persoanelor neautorizate. A se proteja de lumină. Polimerizarea compozitului poate fi inițiată cu lumină ambientală sau cu o lampă de operare dentară. A se proteja de căldură. A se feri de înghet. Utilizați în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Nu folosiți după data de expirare.

DEPOZITARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui. Dacă este păstrat la o temperatură mai scăzută, reduceți la temperatura camerei înainte de utilizare. Pentru utilizare numai de către stomatologi și tehnicieni dentari.

GARANȚIE

ARKONA va înlocui produsele care s-au dovedit a fi defecte sau vor rambursa prețul achiziției. ARKONA nu răspunde pentru nicio pierdere sau daună cauzată de utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Instrucțiuni de utilizare emise la: 24.02.2020



ARKONA

Laboratorum Farmakologii Stomatologicznej
Nasutów 99 C, 21-025 Niemce, EU



1639