



Fácil de abrir

Listo para
SU USO

Fácil de llenar

Eliminación
segura

Elimina completamente
el riesgo de infecciones
cruzadas

Apuntes

NUEVO

EXCEPCIONAL



CROSS INFECTION CONTROL
C O M P O S I T E



LA DOSIS ADECUADA
PARA UN PACIENTE

COMODIDAD A BAJO
PRECIO


D L S DENTAL LIFE
SCIENCES

DENTAL LIFE SCIENCES (mfg) Ltd.
Unit A3, Wigan Enterprise Court,
Wigan Enterprise Park, WN2 2LE
Manufactured in the United Kingdom

www.dentallifesciences.com

CROSS INFECTION CONTROL C O M P O S I T E


Contenido de rellenadores	78 wt%
Resistencia a la flexión [MPa]	135 ± 10 MPa
Absorción de agua	16 ± 2 µg/mm ³
Solubilidad en agua	0.7 ± 0.1 µg/mm ³

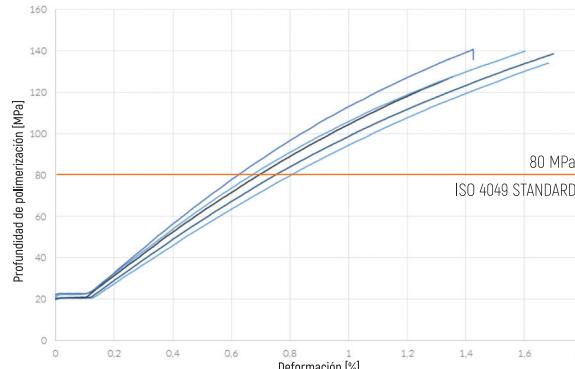

Resultados de las pruebas de resistencia a la flexión realizadas en conformidad con los requisitos de la norma ISO 4049

Depth of cure

Lamp	Shade	20 s	30 s
Halogen/LED (500-800 mW/cm ²)	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2	2.0	2.5
	A3.5, OA2, OA3, D3	1.8	2.2
	Incisal	3.0	3.5
LED (800-1200 mW/cm ²)	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2	2.5	3.0
	A3.5, OA2, OA3, D3	2.2	2.5
	Incisal	>3.5	>3.5

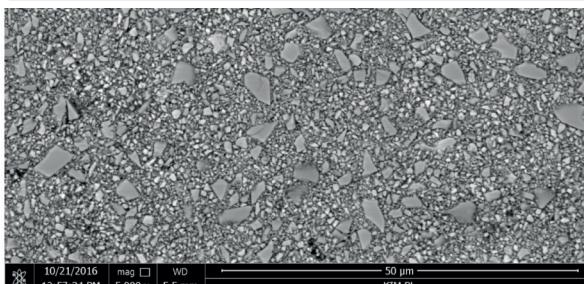

Distribución uniforme de las moléculas del relleno (SEM image x 5000)

CALIDAD Y EFICACIA
- SIN COMPROMISO

Con base en las pruebas de laboratorio de DLS.

Ajustado a las necesidades individuales – creado para ti

¿Trabajas independientemente o con asistente?

Con asistente



15 blisters



20 blisters

Si tienes asistente en el trabajo, nuestro envase resulta fácil de usar e indica de manera legible el nivel de material restante en el blister.

Dispensador – tu tercera mano



Una ventanilla vertical permite controlar el número de blisters.



10 blisters

A2

Cada blister está claramente marcado para indicar el matiz del composite.

Matices: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2, D3, OA2, OA3, Incisal