



Facile à ouvrir



Prêt à utiliser



Facile à compléter



Élimination en toute sécurité

Élimine complètement le risque d'infections croisées



Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOUVEAU

UNIQUE



**CROSS INFECTION CONTROL
C O M P O S I T E**



**DOSE APPROPRIÉE
POUR UN PATIENT**

**COMMODITÉ À BAS
PRIX**


D L S DENTAL LIFE SCIENCES

DENTAL LIFE SCIENCES (mfg) Ltd.
Unit A3, Wigan Enterprise Court,
Wigan Enterprise Park, WN2 2LE
Manufactured in the United Kingdom

www.dentallifesciences.com

CROSS INFECTION CONTROL COMPOSITE


Contenu des charges	78 wt%
Résistance à la flexion [MPa]	135 ± 10 MPa
Absorption d'eau	16 ± 2 µg/mm³
Solubilité dans l'eau	0.7 ± 0.1 µg/mm³

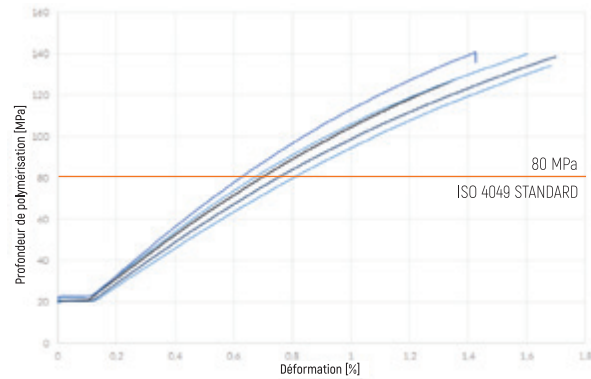

Les résultats des tests de résistance à la flexion effectués conformément à la norme ISO 4049

Depth of cure

Lamp	Shade	20 s	30 s
Halogen/LED (500-800 mW/cm²)	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2	2.0	2.5
	A3.5, OA2, OA3, D3	1.8	2.2
	Incisal	3.0	3.5
LED (800-1200 mW/cm²)	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2	2.5	3.0
	A3.5, OA2, OA3, D3	2.2	2.5
	Incisal	>3.5	>3.5

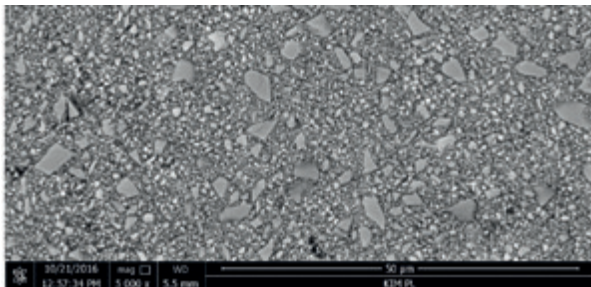

Une répartition uniforme des particules de charge (SEM image x 5000)

**QUALITÉ ET EFFICACITÉ
- SANS COMPROMIS**

Basé sur des tests de laboratoire DLS.

Adapté aux besoins individuels – conçu en pensant à vous.

Travailler-vous seul ou avec un(e) assistant(e) ?

Avec un(e) assistant(e)

Seul(e)



15 blisters



20 blisters

Si vous travaillez avec un(e) assistant(e), notre emballage est facile à utiliser et indique clairement le niveau de consommation des blisters.



10 blisters

La fenêtre verticale vous donne la possibilité de contrôler la quantité de blisters.

Dispenser – votre troisième main



Chaque blister possède le marquage clair concernant la teinte du composite.

Teintes: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2, D3, OA2, OA3, Incisal